

SKINCAD 3D

"Proteccion de la salud"

SKINCAD 3D

Análisis tridimensional
Piel y Cabello

¡ EL ANÁLISIS
EMOCIONAL
PROFESIONAL!



SKINCAD 3D

¡EL ANÁLISIS EMOCIONAL PROFESIONAL!



- ✓ Una experiencia de COMUNICACIÓN EMOCIONAL FUERTE con imágenes de alta resolución en iMAC 21"
- ✓ INVOLUCRE a su cliente durante el análisis y aumente su CONCIENCIA sobre el estado real de la piel y el cabello
- ✓ Ofrezca un análisis altamente PROFESIONAL

SKINCAD 3D

SKINCAD 3D è un sistema ad alta tecnologia per l'analisi professionale, completa ed approfondita della condizione della pelle del viso e del cuoio capelluto.

Parámetros medidos:

- Hidratación de la piel
- Perfilometría de Arrugas
- Análisis de sebo
- Análisis del estrato córneo
- Análisis discromía
- Análisis de poros
- Análisis de la condición del cabello y el cuero cabelludo

Posibilidad de Análisis

- Completo
- Parámetros individuales



SKINCAD 3D

BENEFICIOS

1. **Sistema tecnológico** instrumental no invasivo
2. **Análisis** completo o individual de las imperfecciones de la piel y el cabello
3. Definición de una **protocolo** de tratamiento **personalizado**
4. Uso de algoritmos propios de las **técnicas de bioingeniería** para analizar las imágenes



SKINCAD 3D

Apple iMAC 21,5" incluso

BENEFICIOS

5. Tecnología de **análisis profesional**
6. La **mejor calidad de imagen** del mercado.
7. **Satisfacción del cliente:** determinar el tratamiento correcto para su condición
8. Genere **CONFIANZA** con una experiencia analítica más impactante y de calidad



SKINCAD 3D

BENEFICIOS

9. Aumentar la **venta** cruzada de **cosméticos**
10. Análisis **completo** rápido
11. Posibilidad de analizar parámetros individuales
12. Función **antes y después**
13. **Registro de clientes**



SKINCAD 3D

HARDWARE

- ✓ Microscopio digital con rango de zoom de 20X a 200X
- ✓ Consola de instrumentos antibacteriana de Corian
- ✓ Corneómetro capacitivo
- ✓ Kit de parches de sebo desechables

iMAC 21" ADAPTADO
CON SOFTWARE
SKINCAD 3D INCLUIDO !



SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ **HIDRATACIÓN**
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO




Analiza los niveles de hidratación a través de un corneómetro capacitivo, un instrumento capaz de medir la impedancia del estrato córneo.

Práctico de usar, los valores se pueden medir en diferentes áreas de la cara (frente, contorno de ojos, contorno de labios).

SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

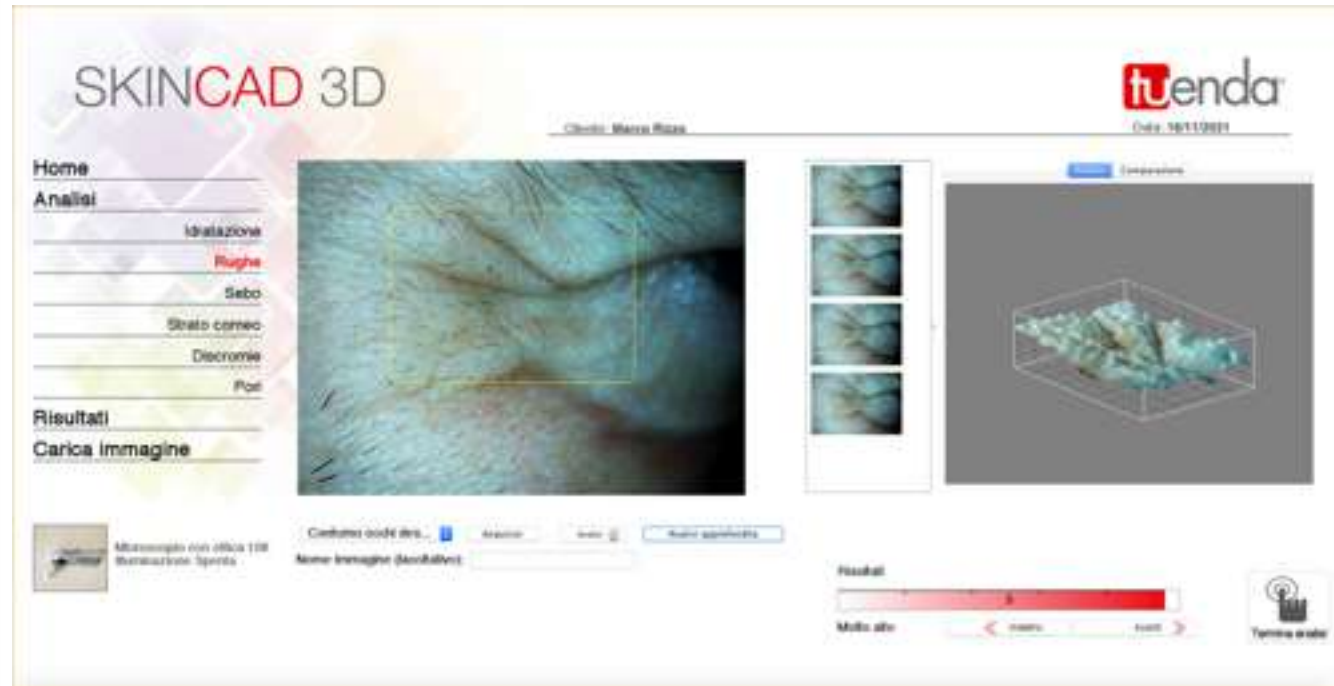

Reconstrucción 3D de una imagen mediante el análisis de imágenes digitales con MICROSCOPIO ÓPTICO (Zoom 20X).

La Perfilometría de Arrugas se basa en los índices de Rugosidad (R_a , R_q , R_{ku} , R_{sk} , R_v , R_p , R_t), según la norma ISO 4287/2000.





Índices de rugosidad

SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

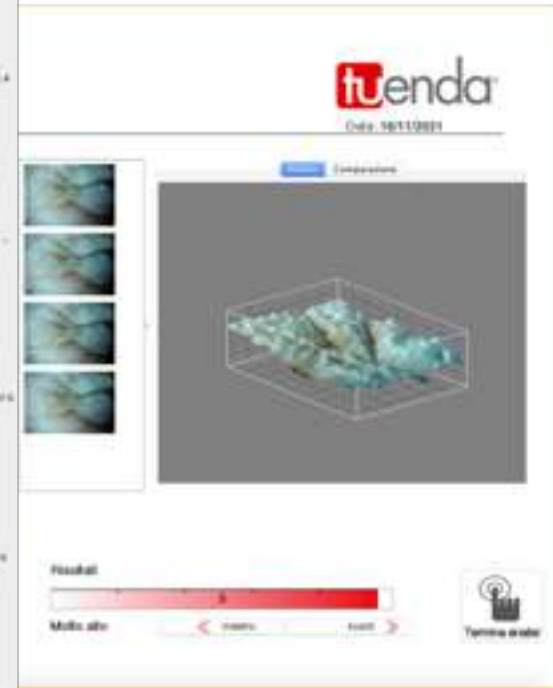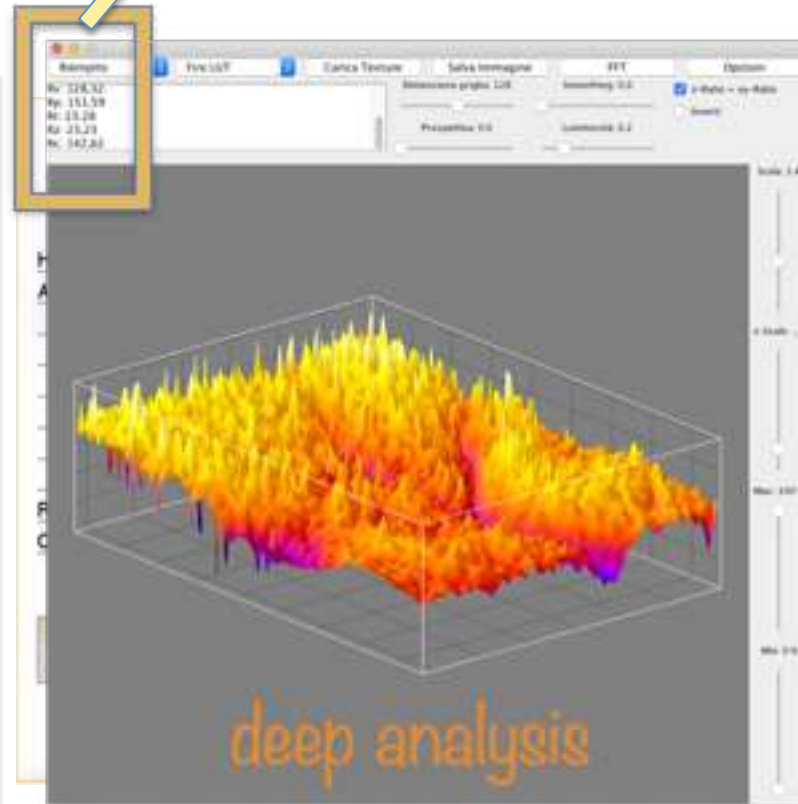

Reconstrucción 3D de una imagen mediante el análisis de imágenes digitales con MICROSCOPIO ÓPTICO (Zoom 20X).


La Perfilometría de Arrugas se basa en los índices de Rugosidad (R_a , R_q , R_{ku} , R_{sk} , R_v , R_p , R_t), según la norma ISO 4287/2000.



SKINCAD 3D

SOFTWARE


- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

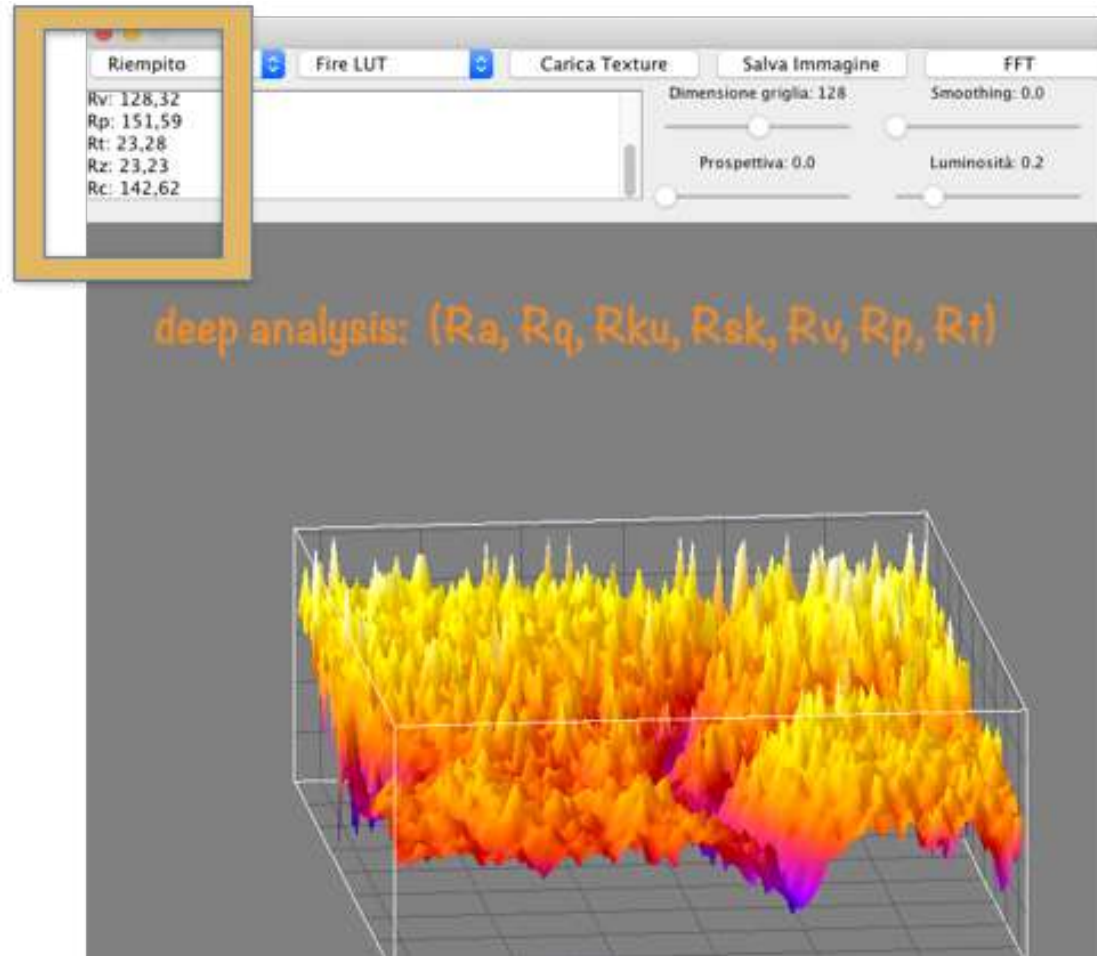

SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ **SEBO**
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

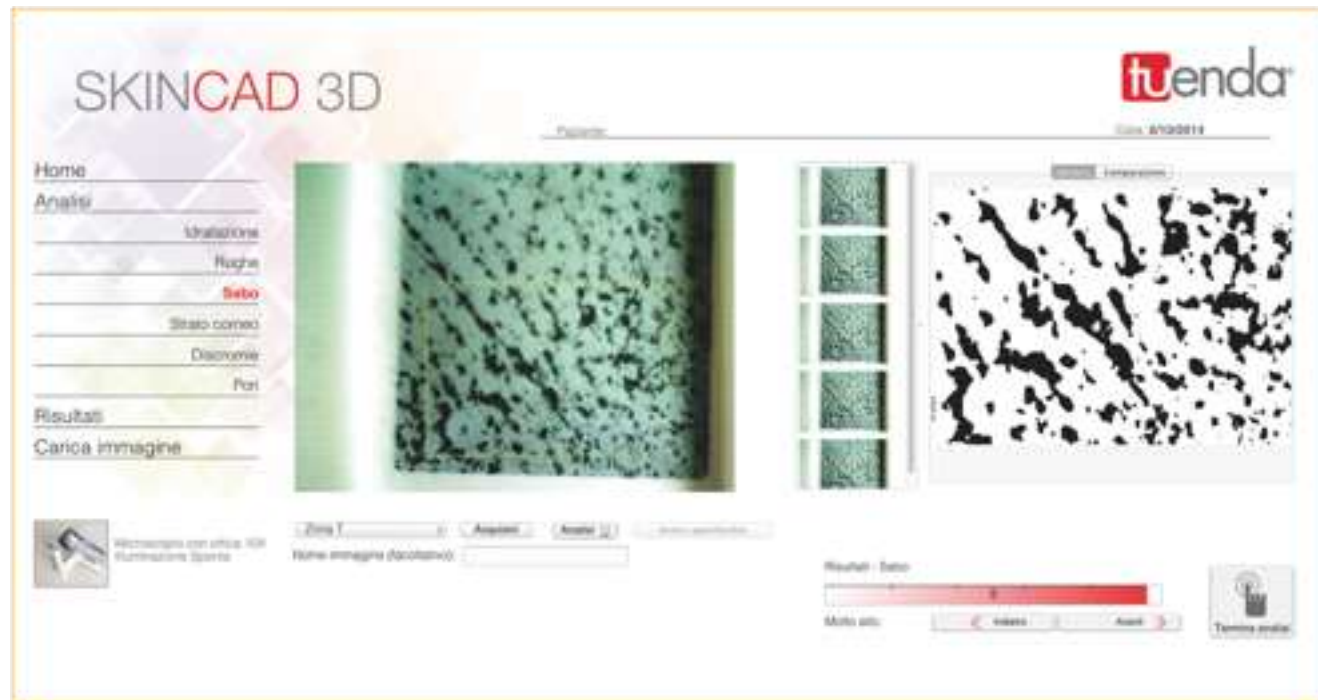


Los niveles de sebo se miden usando **parches de sebo** desechables aplicados a la piel y luego analizados bajo un **microscopio (zoom 20X)**



SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

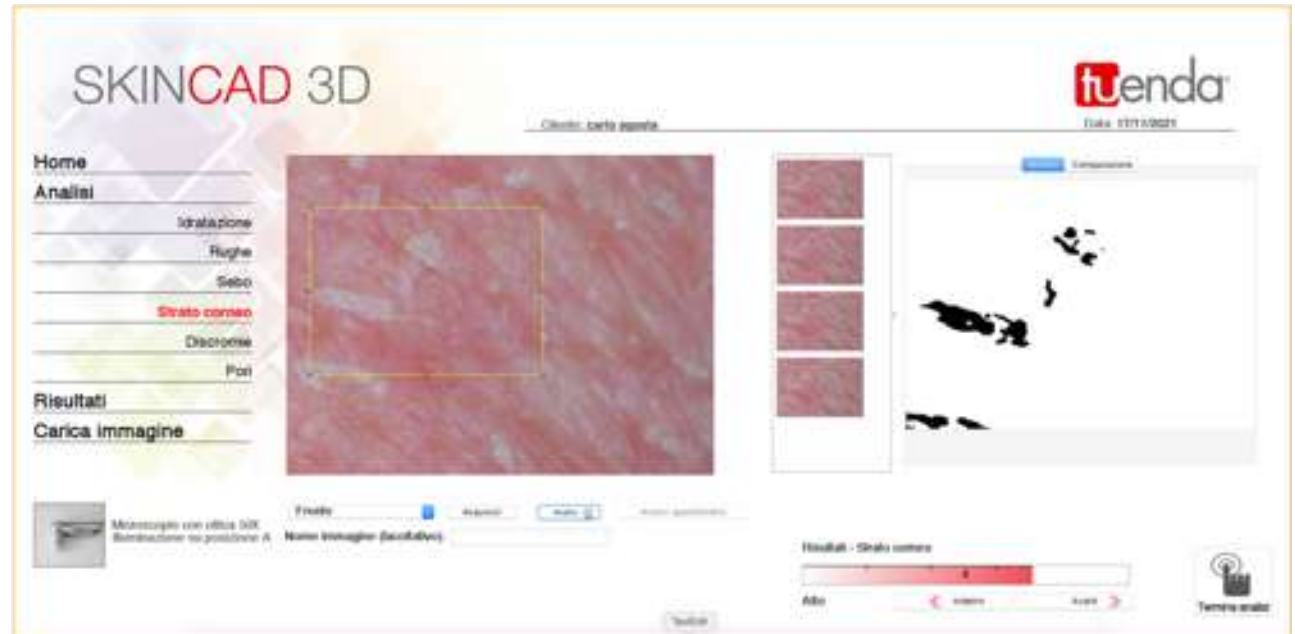


SKINCAD 3D (Zoom 50X) permite identificar y cuantificar el número de **corneocitos** que se desprenden del estrato córneo sin utilizar una técnica de extracción invasiva para determinar la extensión de la exfoliación.



SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ **MANCHAS EN LA PIEL**
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

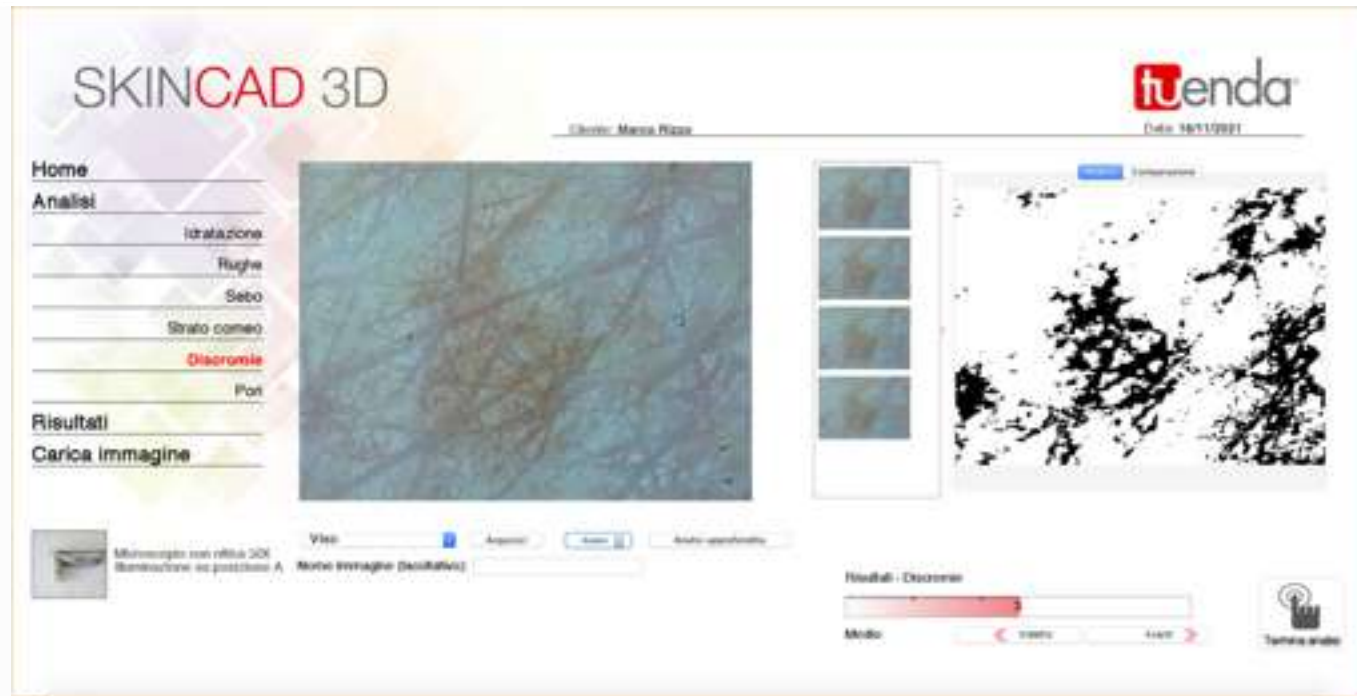

Usando un videomicroscopio de iluminación polarizada, es posible realizar un análisis de las decoloraciones de la piel en diferentes puntos de la cara usando **el sistema de coordenadas cromáticas CIE Lab** para determinar las principales causas de la condición.



SKINCAD 3D

MANCHAS EN LA PIEL

SOFTWARE


- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ **MANCHAS EN LA PIEL**
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

Cada color de la imagen es descompuesto por el sistema CIE LAB en las tres coordenadas L, a, b:

L= brillo o blanco oscuro

a= matiz; de verde a rojo

b= saturación; del azul al amarillo y puede expresarse desde un punto de vista cualitativo con los adjetivos «color suave...fuerte»

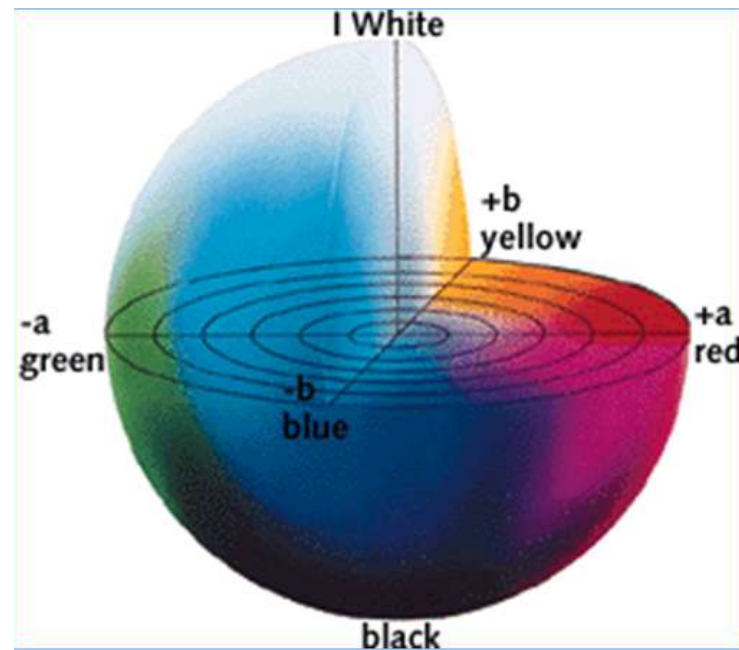


SKINCAD 3D

Mancha por inflamación/
microcirculación

Mancha por exposición al
sol

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ **MANCHAS EN LA PIEL**
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO

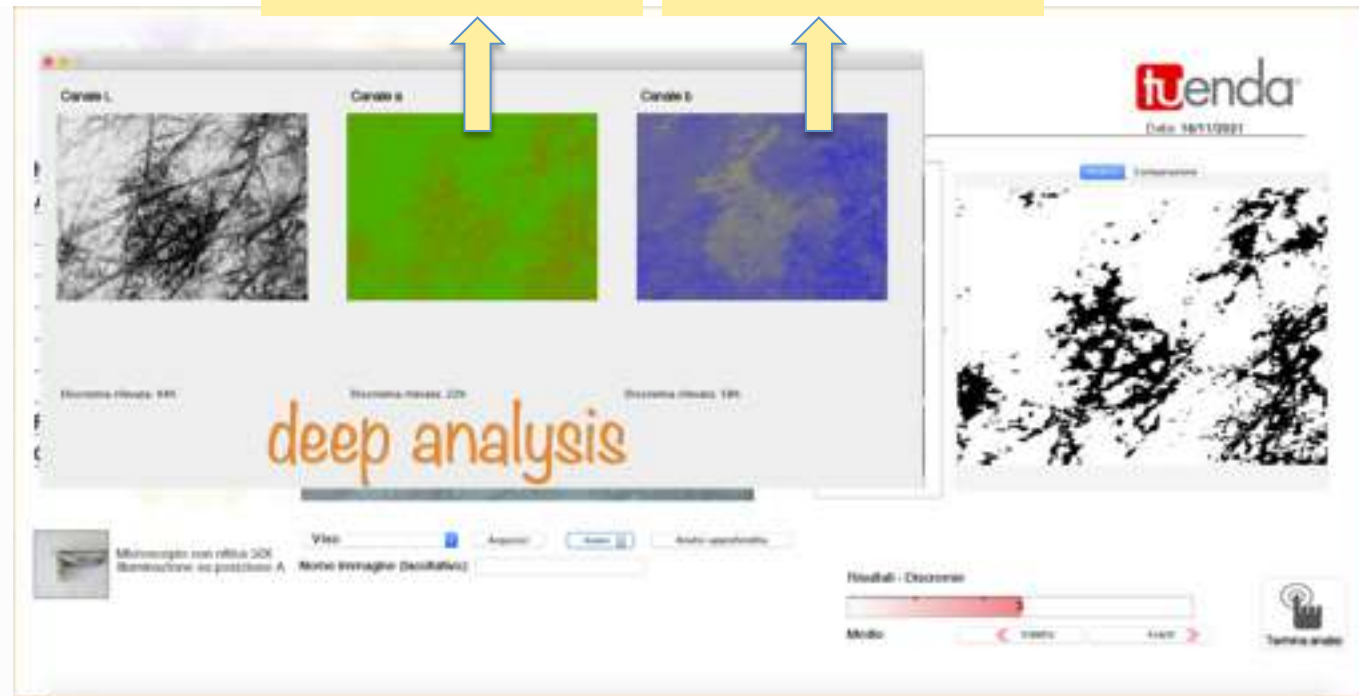

Utilizando el sistema de coordenadas cromáticas de CIE Lab es posible identificar el origen y las principales causas de la mancha en la piel.



SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ ANÁLISIS DE CABELLO




El SOFTWARE puede medir el **diámetro de los poros** para detectar y evaluar el grado de dilatación.



SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ HIDRATACIÓN
- ✓ ARRUGAS/CICATRICES 3D
- ✓ SEBO
- ✓ EXFOLIACIÓN DEL ESTRATO CORNEO
- ✓ MANCHAS EN LA PIEL
- ✓ DILATACIÓN DE POROS
- ✓ **ANÁLISIS DE CABELLO**

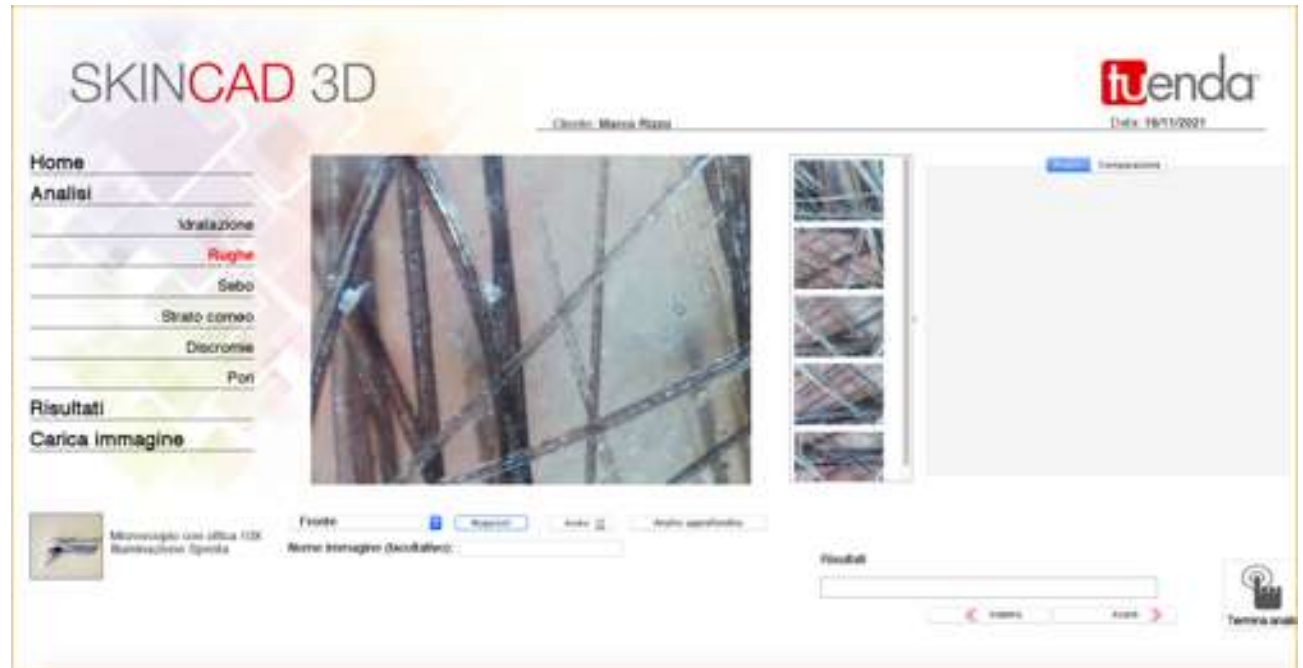

SKINCAD 3D (ZOOM 200X) puede evaluar visualmente el estado del cuero cabelludo y el cabello.



SKINCAD 3D

SOFTWARE

✓ ANTES Y DESPUÉS DE




Función "ANTES y DESPUÉS" para evaluar el estado de la piel y el cabello del cliente a lo largo del tiempo.

SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ INFORME PERSONALIZADO IMPRIMIBLE
- ✓ PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

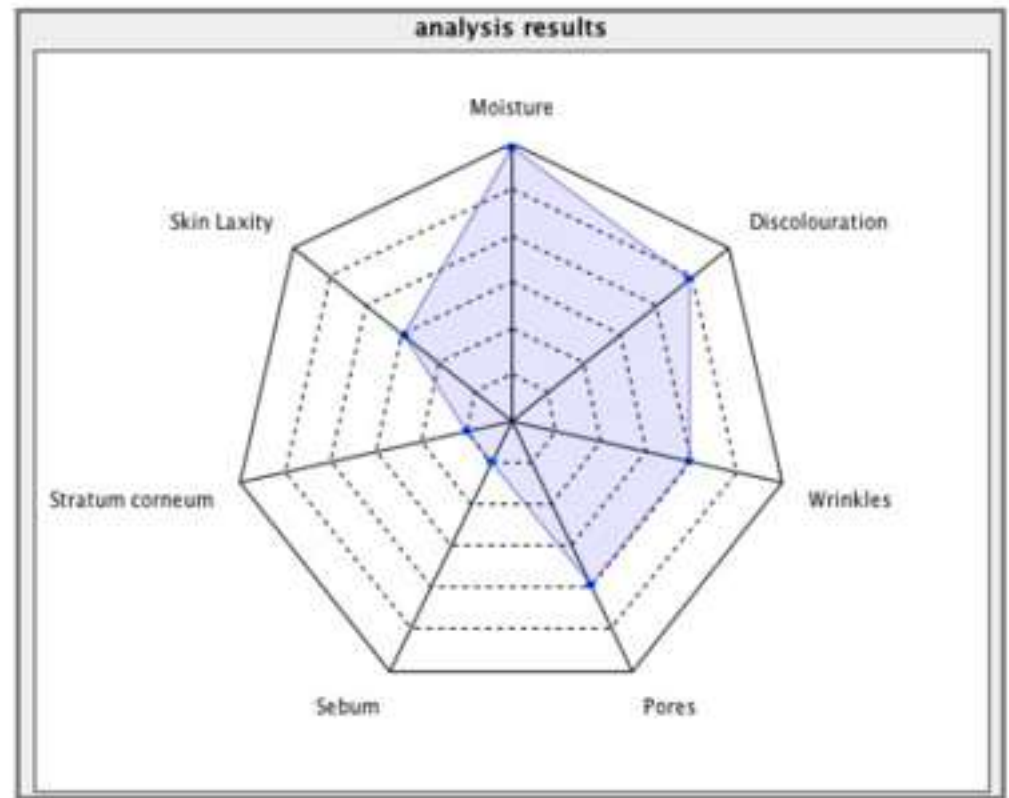

SKINCAD 3D

SOFTWARE

- ✓ INFORME PERSONALIZADO IMPRIMIBLE
- ✓ PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

Protocollo Ambulatoriale Ringiovanimento

apparecchiatura - rf feel ringiovanimento
tempo di trattamento per ciascuna seduta: 30 minuti. intervallo di tempo tra sedute: tra i 7 ed i 14 giorni, per una durata complessiva consigliata di 9 settimane. rassodante, elasticizzante, antiage; idoneo per tutti i tipi di pelle in sinergia con principi attivi specifici.

Protocollo Domiciliare Tonificante

tuenda 10 - tuenda filler plus
si consiglia l'uso domiciliare della crema tuenda tone plus 50ml. applicare su viso e collo 1 volta al giorno, dopo aver precedentemente detergo la pelle, per tutta la durata del ciclo di trattamento.

Tecnologías + Dermocosmética

☐ Gravidanza
☐ Pelli sensibili
☐ Couperose

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO

SKINCAD 3D
análisis personal 3D con resultados

tuenda
Beauty Travel
06-05-2018

Protocollo Ambulatoriale

trattamento/Trattamento laser 6 Bedside
tempo di trattamento per ciascuna seduta: 30 minuti. intervallo di tempo tra sedute: tra i 7 ed i 14 giorni, per una durata complessiva consigliata di 9 settimane. rassodante, elasticizzante, antiage; idoneo per tutti i tipi di pelle in sinergia con principi attivi specifici.

trattamento/Trattamento laser 6 Bedside
tempo di trattamento per ciascuna seduta: 30 minuti. intervallo di tempo tra sedute: tra i 7 ed i 14 giorni, per una durata complessiva consigliata di 9 settimane.

Protocollo Domiciliare

tuenda 10 - tuenda filler plus
si consiglia l'uso domiciliare della crema tuenda tone plus 50ml. applicare su viso e collo 1 volta al giorno, dopo aver precedentemente detergo la pelle, per tutta la durata del ciclo di trattamento.

**Distribuidor exclusivo
para España y Portugal**



Oficinas Centrales

Avda. Marín, 22 bajo
36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra)
España
986 392 665